

PRESS RELEASE

2026 年 2 月 16 日
理化学研究所、高輝度光科学研究センター
東北大学、京都大学

タンパク質の動きを捉える新しい試料導入システムを開発

ーテープ搬送による試料導入で試料消費量を低減ー

概要


理化学研究所（理研）放射光科学研究センタービームライン開発チームの姜正敏研究員、同 SACLA ビームライン基盤グループの矢橋牧名グループディレクター、高輝度光科学研究センターXFEL 利用研究推進室の登野健介チームリーダー、東北大学多元物質科学研究所の南後恵理子教授、京都大学大学院医学研究科の岩田想教授らの国際共同研究グループは、X 線自由電子レーザー（XFEL）施設「SACLA^[1]」において、タンパク質の動きを捉える連続フェムト秒結晶構造解析（SFX）^[2]のための試料を導入する新たなシステムを開発しました。

本研究成果により、わずかな量の試料で時分割の構造解析が可能となり、タンパク質の動きが原子レベルで明らかになることが期待されます。

生体の重要な構成成分であるタンパク質が機能する際、巧妙にその構造を変えて機能を発揮していることが知られています。その動きを動画のように可視化する技術として、XFEL を用いた時分割連続フェムト秒結晶構造解析（時分割 SFX）^[2]が利用されてきました。

今回、国際共同研究グループは、SACLA において、結晶を含んだ微小液滴をテープの上に滴下し、ベルトコンベアのように X 線レーザーの照射領域に運ぶ手法を開発しました。結晶を含んだ微小液滴に反応分子などを含む別の微小液滴を重ねて滴下することにより、タンパク質が反応する過程を追跡する実験も可能となりました。

本研究は、科学雑誌『*Journal of Applied Crystallography*』（2 月 8 日付）に掲載されました。

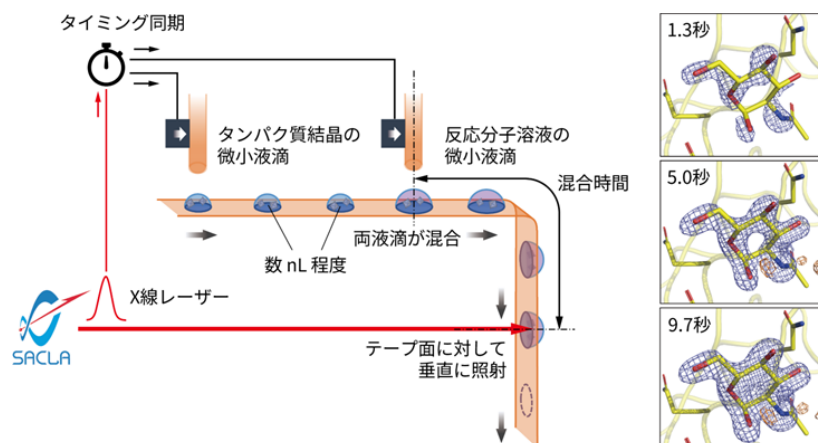

テープ搬送による試料導入システムでタンパク質の動的構造解析をわずかな試料で実現

背景

ヒトの体の重要な構成成分であるタンパク質は、複雑に折り畳まれた構造を取っています。その立体構造と機能は深く関連しており、タンパク質が機能を発揮する際には巧みに構造を変えることが知られています。この動的な構造変化を原子レベルで解明することは、生命現象の理解や薬剤設計の上でも重要です。しかし、従来の方法ではタンパク質分子が素早く変化する過程を原子レベルで可視化することは困難でした。

X線自由電子レーザー(XFEL)を用いた「連続フェムト秒結晶構造解析(SFX)」は、この動的構造の解明に大きな進展をもたらしました。SFXは、フェムト秒(1,000兆分の1秒)単位の極めて短い発光時間を持つX線レーザーをタンパク質の微小結晶に照射し、生体温度に近い条件で立体構造データを取得する手法です。特に「時分割連続フェムト秒結晶構造解析(時分割SFX)」は、光、熱などの物理的刺激や、基質^[3]、リガンド(配位子)^[4]などの分子との結合によってタンパク質との反応が開始する時間を変えながら測定が可能であり、構造変化をリアルタイムに捉える唯一の手法として用いられてきました。

XFELを用いた実験では、高強度のX線レーザーによる照射後に試料が崩壊するため、新たな試料を次々と導入する必要があります。従来のSFX実験では、微小結晶を液体に混合してX線レーザーによる照射位置まで連続的に流す方法が使われてきました。しかし、X線レーザーは連続的に試料に照射されるのではなく、例えば1秒間に数十回程度の繰り返しで間欠的に照射されます。X線レーザーが照射されていない間も試料は流れ続けるため、その大部分がX線レーザー照射の実験に用いられず浪費されていました。タンパク質試料の調製には多大な時間とコストを要するため、この浪費を最小限に抑えることは重要な課題となっています。

研究手法と成果

タンパク質試料の浪費といった課題を解決するため、先行研究ではテープをコンベアベルトとして利用し、その上に滴下した液滴をX線レーザー照射位置まで運ぶ方法が提案されていました。国際共同研究グループは、この手法をさらに発展させ、よりコンパクトで実用性の高い試料導入システムを開発しました(図1)。

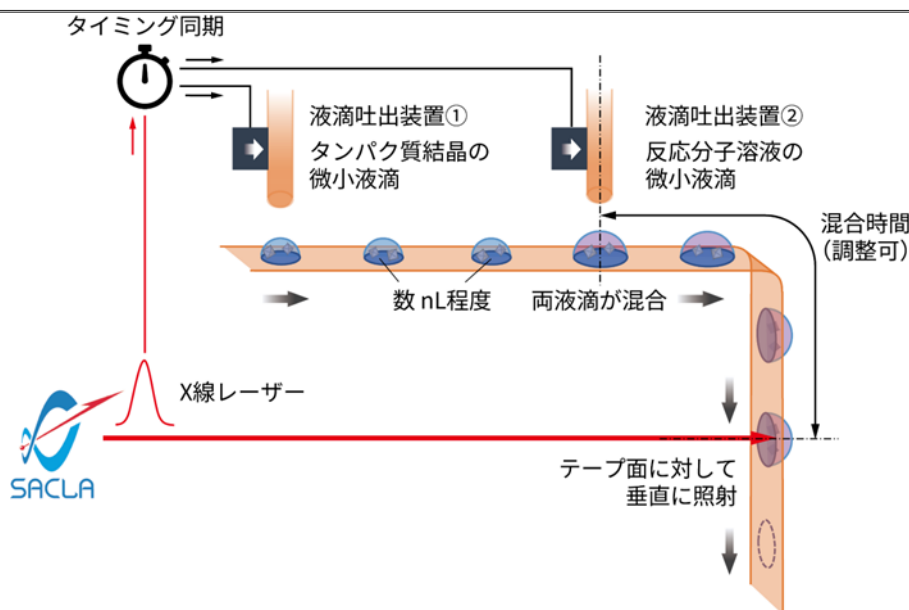


図 1 テープ搬送による試料導入システムの概念図

ナノリットルスケールの微小液滴を高速に吐出する装置を 2 台、テープ送り方向に沿って配置し、結晶を含む微小液滴と反応分子溶液の微小液滴をテープ面上に重ねて吐出する。X 線レーザーの照射位置までベルトコンベアのように運び、液滴が載ったテープ面に対して垂直に X 線を照射してデータを取得する。X 線レーザーパルスの照射タイミングに合わせて液滴を供給し、試料の浪費を抑える。

このシステムでは、ナノリットル (nL、1nL は 10 億分の 1 リットル) スケールの微小液滴を高速に吐出 (としゅつ) する装置を 2 台、テープ送り方向に沿って直列に配置しました。テープは、耐久性などに優れた、厚さ約 12 マイクロメートル (μm 、1 μm は 100 万分の 1 メートル) のポリイミドフィルムを採用しました。それぞれの液滴吐出装置から、結晶を含む微小液滴と反応分子溶液の微小液滴をテープ面上に連続的に重ねて吐出します。その後、ベルトコンベアのように X 線レーザーの照射位置まで液滴を運び、液滴が載ったテープの裏面から垂直に X 線レーザーを照射してデータを取得します。テープ面を X 線に垂直に配置したことで、X 線の焦点とテープ面上の液滴との位置合わせが飛躍的に簡便になり、測定の安定性が向上しました。また、液滴の吐出タイミングを、間欠的な X 線レーザーの照射と同期させることで、高効率にデータを収集することができます。さらに、テープ送り速度や反応開始地点から X 線照射位置までの距離を調整することで、約 0.1 秒から 20 秒弱までの範囲で、二つの微小液滴の混合時間を制御できるようにしました。

本システムの性能を実証するため、X 線自由電子レーザー施設「SACLA」において、二液混合型の時分割 SFX 実験を実施しました。モデルタンパク質試料として、酵素であるニワトリ卵白由来のリゾチーム^[5]の結晶と、その阻害剤である *N*-アセチルグルコサミン^[6]を使用しました。実験では、リゾチーム結晶を含む微小液滴と、*N*-アセチルグルコサミン溶液の微小液滴がテープ面上で重なった時から X 線レーザーが照射されるまでの時間を数点設定し、反応過程における活性部位の変化を追跡しました。

この実験により、混合から一定時間経過後に、基質がリゾチームの活性部位に結合していく過程を原子レベルで捉えることに成功しました（図 2）。さらに、各時点のデータセットを取得するために必要なリゾチームの消費量をわずか 1～2mg に抑えることができました。これは、従来の実験方法に比べて、数十～数百分の 1 に当たる量となります。本システムでは、可視光レーザーを導入することで光励起型の時分割 SFX 実験も可能であり、これまで以上に多様なタンパク質に対して時分割 SFX 実験を適用することができます。

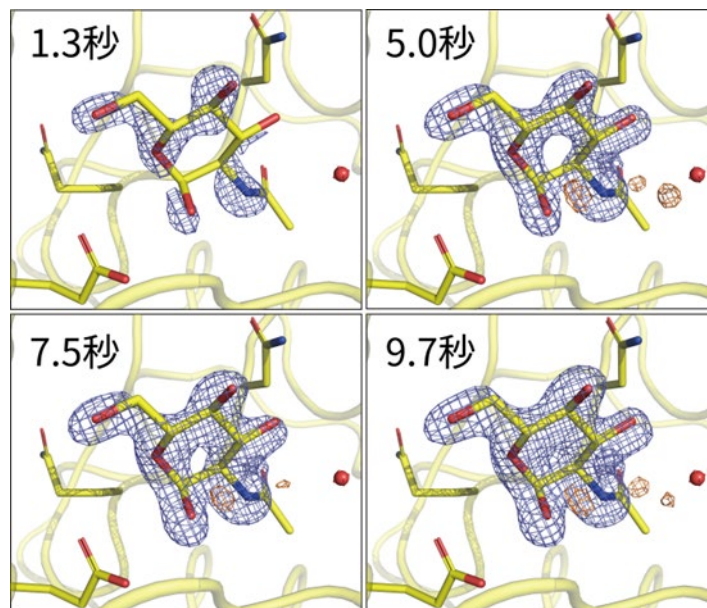


図 2 リゾチームの反応過程における活性部位の変化

一定時間経過後に、基質がリゾチームの活性部位に結合していく過程の原子レベルでの立体構造。各図中の左上は、リゾチーム結晶を含む微小液滴に反応分子溶液を滴下した後の経過時間。青色のメッシュは電子密度で、活性部位の変化を示している。メッシュ内スティックモデルの黄色は炭素原子、青色は窒素原子、赤色は酸素原子を示す。

今後の期待

今回開発したシステムは、従来 SFX で用いられてきた連続的な試料導入方法とは異なり、XFEL を用いた X 線レーザーの照射に同期した試料導入により試料消費量を削減するとともに、安定して高品質なデータを取得することを可能にしました。また、従来の方法に比べ、反応開始後から数十秒といった遅い反応を捉えることもできます。本技術の普及により、酵素などにおける反応過程の解明や、薬剤が標的タンパク質に結合する詳細なプロセスの可視化が加速されることが期待されます。

論文情報

<タイトル>

Compact Tape-Driven Sample Delivery System for Serial Femtosecond

Crystallography

<著者名>

Jungmin Kang, Yoshiaki Shimazu, Fangjia Luo, Ayumi Yamashita, Tomoyuki Tanaka, Yuichi Inubushi, Kensuke Tono, Nipawan Nuemket, Allen M. Orville, So Iwata, Eriko Nango, and Makina Yabashi

<雑誌>

Journal of Applied Crystallography

<DOI>

[10.1107/S1600576726000063](https://doi.org/10.1107/S1600576726000063)

補足説明

[1] SACLA

理研と高輝度光科学研究センター（JASRI）が共同で建設した日本初の X 線自由電子レーザー（XFEL：X-ray Free-Electron Laser）施設。加速器の中で電子の固まりを正確な制御の下で一斉に振動させ、その電子の固まりから X 線レーザーを発生させる X 線発生装置。2006 年度から 5 年間の計画で建設・整備を進めた国家基幹技術の一つで 2011 年 3 月に完成し、SPRING-8 Angstrom Compact free-electron LASER の頭文字を取って SACLA（サクラ）と命名された。2011 年 6 月に最初の X 線レーザーを発振、2012 年 3 月から供用運転が開始され、利用実験が始まった。大きさが諸外国の同様の施設と比べて数分の 1 と、コンパクトであるにもかかわらず、0.1 ナノメートル以下という世界最短波長クラスのレーザーの生成能力を有している。詳細は SACLA のウェブサイト（<http://xfel.riken.jp/>）を参照。

[2] 連続フェムト秒結晶構造解析（SFX）、時分割連続フェムト秒結晶構造解析（時分割 SFX）

連続フェムト秒結晶構造解析（SFX）は、多数の微小結晶を含む液体などをインジェクターと呼ばれる装置から連続的に導入し、フェムト秒の X 線レーザーパルス照射して結晶構造を解析する手法。配向（配列方向）の異なる多数の微小結晶からの回折データを連続的に収集する。さらに、光照射（光励起型）、温度上昇、基質（[3]参照）混合（二液混合型）などで反応が開始する時間を変えながら測定することで、タンパク質の構造変化をフェムト秒～秒スケールで連続追跡し、反応過程を“動画”のように可視化できる手法を時分割 SFX という。SFX は、Serial Femtosecond Crystallography の略。

[3] 基質

酵素反応によって消費される化学物質のこと。例えば、酒類に含まれるエタノールはアルコール分解酵素の基質である。

[4] リガンド（配位子）

受容体や酵素などの標的タンパク質に結合し、その働きを「スイッチ」のように調節する分子。医薬品候補の多くはリガンドとして作用し、病気に関わる反応を選択的に制御する。構造解析によりタンパク質とリガンドの結合様式を可視化できる。

[5] リゾチーム

多糖類を加水分解する酵素の一つ。本研究で用いたニワトリ卵白リゾチームは 129 個のアミノ酸残基により構成されており、2 個のメチオニン、および 8 個のシステインを含む。タンパク質の X 線結晶構造解析において、リゾチームはモデルタンパク質としてよく用いられる。

[6] N-アセチルグルコサミン

アセチル化した 2-アミノグルコースで糖の一種。細菌の細胞壁（ペプチドグリカン）や真菌のキチン、糖タンパク質の糖鎖の構成要素として広く存在する。生体分子の安定化や認識、シグナル伝達に参与する。

国際共同研究グループ

理化学研究所 放射光科学研究センター

ビームライン開発チーム

研究員 姜 正敏 (カン・ジョンミン)

SACLA ビームライン基盤グループ

グループディレクター 矢橋牧名 (ヤバシ・マキナ)

高輝度光科学研究センター XFEL 利用研究推進室

チームリーダー 登野健介 (トノ・ケンスケ)

東北大学 多元物質科学研究所

教授 南後恵理子 (ナンゴ・エリコ)

(理研 SACLA 利用技術開拓グループ (研究当時) チームリーダー (研究当時))

京都大学 大学院医学研究科

教授 岩田 想 (イワタ・ソウ)

(理研 SACLA 利用技術開拓グループ (研究当時))

グループディレクター (研究当時))

Diamond Light Source UK XFEL Hub (英国)

グループリーダー アレン・オルベイル (Allen M. Orville)

研究支援

本研究は、理化学研究所放射光科学研究センター「SACLA/SPRING-8 基盤開発プログラム（研究代表者：岩田想）」、日本学術振興会（JSPS）科学研究費助成事業新学術領域研究（研究領域提案型）「高速分子動画法によるタンパク質非平衡状態構造解析と分子制御への応用（研究代表者：岩田想）」、同学術変革領域研究（A）「タンパク質機能のポテンシャルを解放する生成的デザイン学（研究代表者：林重彦）」、日本医療研究開発機構（AMED）「創薬等先端技術基盤プラットフォーム（AMED-BINDS）」による助成を受けて行われました。

発表者・機関窓口

<発表者> ※研究内容については発表者にお問い合わせください。

理化学研究所 放射光科学研究センター

ビームライン開発チーム

研究員 姜 正敏 (カン・ジョンミン)
SACLA ビームライン基盤グループ
グループディレクター 矢橋牧名 (ヤバシ・マキナ)

高輝度光科学研究センター XFEL 利用研究推進室
チームリーダー 登野健介 (トノ・ケンスケ)

東北大学 多元物質科学研究所
教授 南後恵理子 (ナンゴ・エリコ)

京都大学 大学院医学研究科
教授 岩田 想 (イワタ・ソウ)

<機関窓口>

理化学研究所 広報部 報道担当
Tel: 050-3495-0247
Email: ex-press@ml.riken.jp

公益財団法人高輝度光科学研究センター (JASRI) 利用推進部 普及情報課
Tel: 0791-58-2785
Email: kouhou@spring8.or.jp

東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室
Tel: 022-217-5198
Email: press.tagen@grp.tohoku.ac.jp

京都大学 広報室 国際広報班
Tel: 075-753-5729
Email: comms@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
